




床ずれ防止用具

身体状況から見た床ずれ防止用具の選び方

床ずれが発生するといわれる 圧力の基準値

体にかかる圧力が毛細血管圧(32mmHg)を超えると毛細血管が閉塞状態になり、皮膚組織には血が通わなくなり、壊死します。

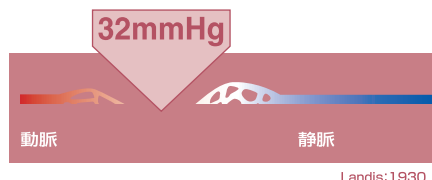

この表はあくまで目安です。医師または専門相談員まで必ずご相談ください。

寝返りができる

汗をよくかく
身体の一部にマヒがある
痛みを訴えることができない
リハビリの実施を指導されている
特殊な体位制限がある

日常的な寝返りが困難

局所(仙骨)に骨突出がある
身体(特に下肢)に拘縮がある
尿失禁・便失禁がある
食事を口から食べることができない
局所以外の身体に浮腫がある
30分以上背あげポジションを継続する
定期的な体位変換が行えない

静止型

夢柔カグラン・スイート(P27)	
アルファプラ L(P27)	
キュオラ(P27)	
アルファプラ F(P28)	
ナーセントコンタ(P28)	
ファセットケア マットレス(P28)	

圧切替型

ここちあ利楽(P29)	
マイクロクライメイト ネクスアイビー(P30)	
ステージア(P30)	
マイクロクライメイト ビッグセルアイズ(P30)	
インフィニティ ビッグセル∞(P31)	
オスカー(P31)	
スコープライト(P31)	

	汗をよくかく	身体の一部にマヒがある	痛みを訴えることができない	リハビリの実施を指導されている	特殊な体位制限がある	局所(仙骨)に骨突出がある	身体(特に下肢)に拘縮がある	尿失禁・便失禁がある	食事を口から食べることができない	局所以外の身体に浮腫がある	30分以上背あげポジションを継続する	定期的な体位変換が行えない
夢柔カグラン・スイート(P27)	○	○	○					○				
アルファプラ L(P27)	○	○	○	○								
キュオラ(P27)	○	○	○	○								
アルファプラ F(P28)		○	○	○		○	○					
ナーセントコンタ(P28)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
ファセットケア マットレス(P28)		○	○	○		○	○					
ここちあ利楽(P29)	○	○	○	○	○ しっかり モード	○ 自動調圧	○	○	○	○	○ 自動調圧	
マイクロクライメイト ネクスアイビー(P30)	○ ファン モーター 内蔵	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ 背上げ時の 圧切替	○
ステージア(P30)	○	○	○	○	○ リハビリ モード	○	○	○	○	○	○	
マイクロクライメイト ビッグセルアイズ(P30)	○ ファン モーター 内蔵		○	○	○ クイック モード	○	○	○	○	○	○ 角度・時間管理 アシスト機能	○
インフィニティ ビッグセル∞(P31)	○ 換気 モード		○	○	○ クイック モード	○	○	○	○	○	○ 自動ヘッド アップ対応機能	○
オスカー(P31)	○ 除湿機能	○	○	○	○ リハビリ モード	○	○	○	○	○	○ 背上げ モード	○
スコープライト(P31)	○ むれ 対策	○	○	○	○	○ 体圧調整	○	○	○	○	○ 体圧調整	○ 全自動

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。
※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換
(寝返り)

病的骨突出

浮腫
(局所以外の部位)

関節拘縮

皮膚湿潤
(多汗・尿・便失禁)

栄養状態低下

床ずれの有無

NPUAP分類(2007年)

ステージⅠ




ステージⅡ

ステージⅢ

ステージⅣ

ポケット
褥瘡

術後

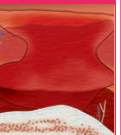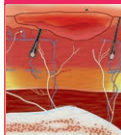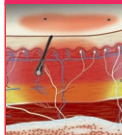OH
スコア
レベル床ずれなし
予防

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

中等度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

高度

OHスケール

評価項目		判定		
1	自立体位変換	できる	どちらでもない	できない
		0点	1.5点	3点
2	病的骨突出 (仙骨)	なし	軽度・中等度	高度
		0点	1.5点	3点
3	浮腫 (むくみ)	なし	あり	
		0点	3点	
4	関節拘縮	なし	あり	
		0点	1点	
合計		点		

OHスコアレベル


0点	危険要因なし
1～3点	軽度 レベル
4～6点	中等度 レベル
7～10点	高度 レベル

2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」



- 0～2cm未満なら「軽度・中等度」

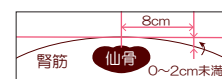

- 2cm以上なら「高度」

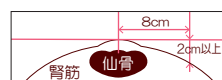

3. 浮腫(むくみ)の判定基準





床ずれ防止用具

【単位:cm】

●夢柔カグラン・スイート

オリジナル
仕様

静止型

ムレ
防止

厚さ10cm



83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:6.8(7.7)kg

株式会社トーカイ

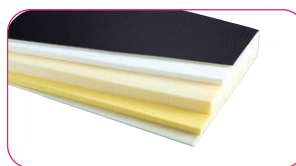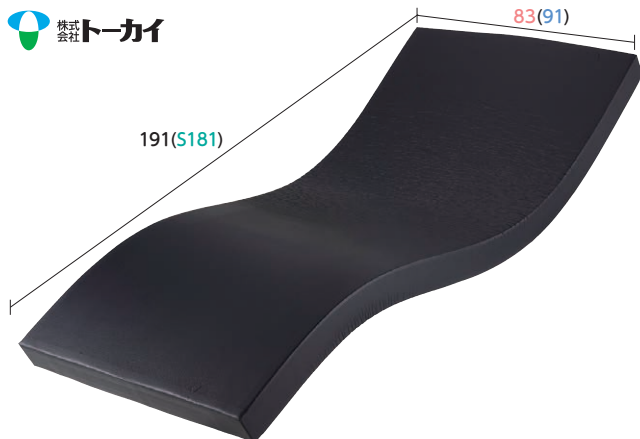透湿・
防水性

床ずれの原因のひとつである不快な蒸れだけを透過する高機能フィルム。液体はもちろん、どんな菌やウィルスも通しません。



■品番:GS830100 / GS910100

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月


レンタル料金

円/月

不快なムレだけを透過するフィルムで全体ラミネートされた、適度な反発力と体圧分散性を持ったリバーシブルマットレスです。

●アルファプラL

株式会社タイカ

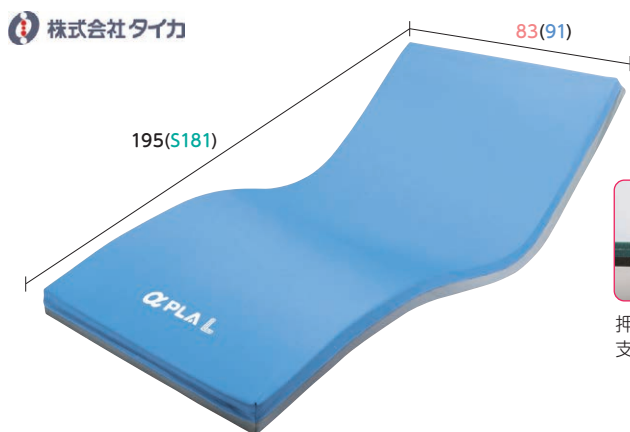

静止型

ムレ
防止

厚さ10cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:6.9(7.6)kg



押し返すような感覚で立ち上がりを支援します。



■品番:MB-LW3R / MB-LW1R


ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行い、高弾力で動きやすいマットレスです。背あげ時にはアルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

●キュオラ

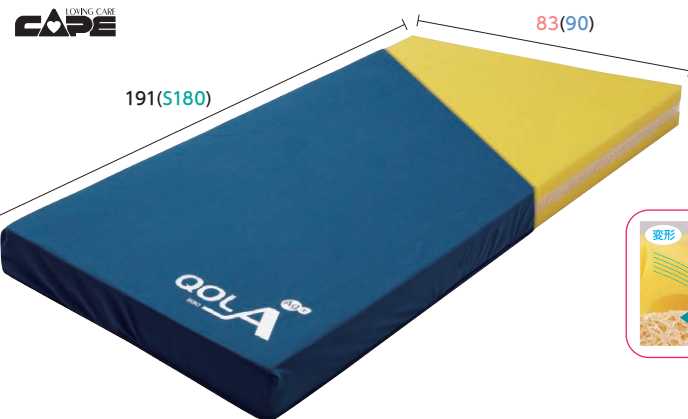LOVING CARE
CAPE

静止型

ムレ
防止




厚さ10cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:6.5(7.0)kg

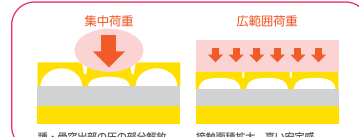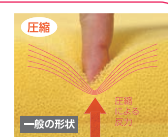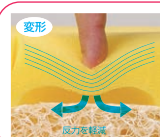

踵・骨突出部の圧の部分解放

接触面積拡大、高い安定感

■品番:CR-590 / CR-591

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

中間層に安定感のあるプレスエアー®を組み合わせることで、表面の体圧分散機能を活かしながら動こうとする力をサポートします。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

●アルファプラフ

株式会社タイカ



静止型

ムレ
防止


厚さ13cm

83cm幅

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量: 8.7(9.5)kg

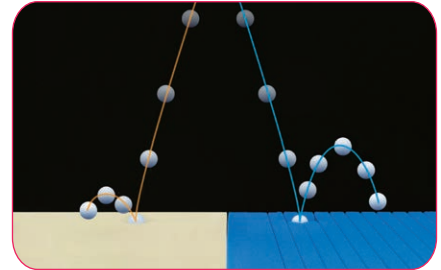

■品番: MB-FW3R / MB-FW1R

ご利用者
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月


レンタル料金

円/月

柔らかいのに弾力があるので、**少ない力**での寝返りや起きあがりをサポートするマットレスです。体重の**軽い方から重い方**まで高い体圧分散効果が得られます。

●ナーセントコンタ

アイ・ソネックス

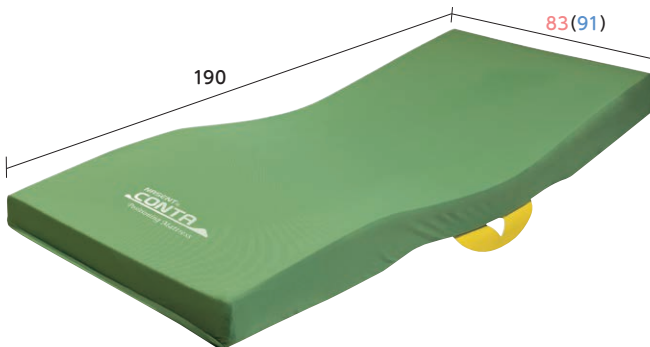

静止型


ムレ
防止

厚さ11~15cm

83cm幅

90・91cm幅

重量: 7.6(8.3)kg

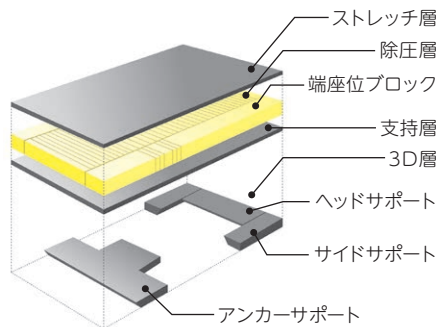

寝位置・座り位置を
明確にする「ねすわりガイド」

■品番: NCMA-83 / NCMA-91

ご利用者
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金


円/月

4層構造の3Dフォームで体圧分散性と姿勢保持を両立。立体形状のサポート部の働きで背上げ時の滑りすわりや横倒れを防ぎます。**ねすわりガイド**により移乗や寝る位置の最適な場所をサポートします。

■ファセットケアマットレス

INOAC

新規採用

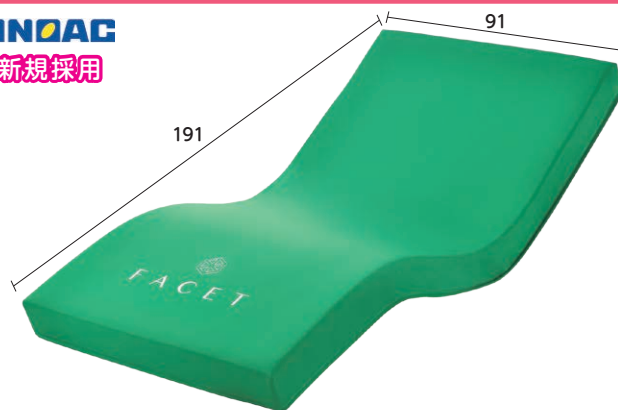


静止型


厚さ12cm

90・91cm幅

重量: 9.0kg

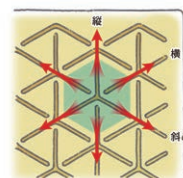

圧力の分散方向

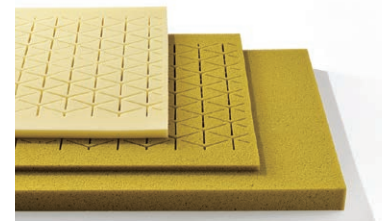

独自の六角形スリットが入った
ウレタン3層構造

■品番: KG1496

ご利用者
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

六角形スリットが縦・横・斜めからの力を効率よく分散。体圧を吸収しつつ**過度な沈み込み**を抑えることで**寝返り動作**をサポートします。カバー表面には**撥水加工**を施しています。




床ずれ防止用具

エアマットの停電時やポンプ不良などの緊急時の対応について

【パラマウントベッド】

ここちあ利楽
(P29)

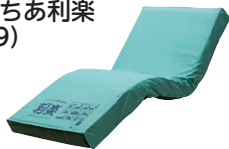

底づきの心配はありません

停電時は空気の排出を自動的に停止します。約2週間空気を保持することができます。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。

電源復旧後は、停電前の設定が維持されます。

【モルテン】

ステージア
(P30)



オスカー
(P31)



スコープライト
(P31)



底づきの心配はありません

長時間の停電で、エアセルの空気が全て抜けてしまったとしても、ウレタンフォームのフィッティングフォーム+底着き防止層があるため、従来のウレタンフォーム系静止型マットレス同等の体圧分散性が確保されています。

ただし、空気が抜けた状態では、目標とする体圧分散性能は発揮されません。

停電復旧後には停電前に設定していた条件に戻ります。

【ケープ】

ネクサスアイビー
(P30)



ビッグセルアイズ
(P30)



ビッグセル∞
(P31)



ラグーナ
(P32)



底づきの心配はありません

災害時などの停電時にエアマットレスの空気漏れを自動で防ぐ機種です。停電と同時に専用ポンプ内の電磁弁が作動してエアセル内の空気漏れを自動で遮断。マットレス全体の内圧を約14日間保持します。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働きません。

電源の復旧後は、直前の設定に自動復帰します。

※ラグーナの貸与品目は体位変換器です。

※ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は働かないため、必要に応じて体位変換を行うなどの対策も必要です。

ここちあ利楽

圧
切替型

除湿
効果

厚さ13cm

83cm幅

90・91cm幅

1日あたりの
電気代
約2.2円

ショートサイズ有

重量:9.6(10.0)kg

as human, for human
PARAMOUNT BED



i-fitting (かたさ自動運転機能)
電源を入れるとすぐに機能します

体重
連動自動調圧

体形
連動自動調圧

背角度
連動自動調圧



背あげ時にカバーを滑らせることで、
背部や踵部に生ずるズレを軽減する
グライドシート

ベッドまわりが邪魔にならない
ビルトインポンプ

約1cmの薄いトップクッション

■品番:KE-973S / KE-971S

20kgから138kgまでの体重や円背・拘縮などの体形、そして背あげ角度に適したかたさを自動で検知し調整。また背あげ時のズレを軽減するグライドシート、エアマットの凹凸感を和らげるトップクッション付きです。

ご利用者
負担額

1割	円/月
2割	円/月
3割	円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

●マイクロクライメイト ネクサスアイビー

CAPE

圧
切替型除湿
効果

厚さ12cm

83cm幅

1日あたりの
電気代
約5.2円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 7.7 (8.1) kg



マイクロクライメイト対応のファンモーター
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現



傾斜型 2層式エアセル×デュアルフィットセル



■品番: CR-770 / CR-773

接触面の温度・湿度の上昇を抑える「マイクロクライメイト対応システム」搭載。傾斜型2層式エアセルが臀部に斜めにかかる力をしっかりと受け止めて、身体のずり落ちを軽減します。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●ステージア

株式会社 モルテン

圧
切替型除湿
効果冷え
対策

厚さ13cm


83cm幅

1日あたりの
電気代
約5.3円

90・91cm幅


ショートサイズ有

重 量: 10.0 (11.0) kg

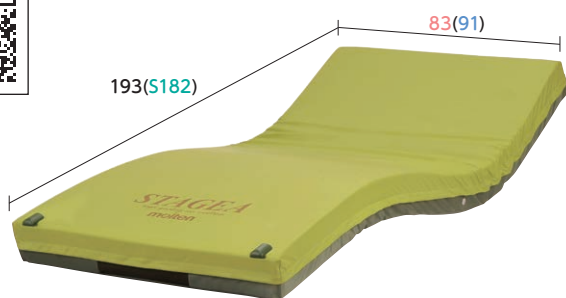

ハイブリッド構造

●長さ方向の断面図

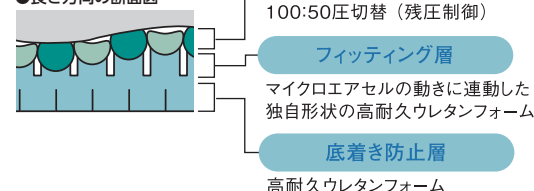

■品番: MSTA83 / MSTA91

冷え対策とムレ対策ができる圧切替型のハイブリッドエアマットです。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	

●マイクロクライメイト ビッグセルアイズ

CAPE

圧
切替型除湿
効果

厚さ15cm

83cm幅

1日あたりの
電気代
約5.2円


90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量: 6.5 (6.8) kg



マイクロクライメイト対応のファンモーター
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現

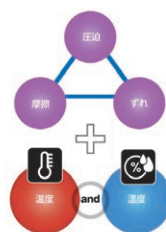背上げ角度・時間管理
アシスト機能

■品番: CR-750 / CR-753

足元に搭載されたファンモーターがマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出します。背上げ時の角度・時間管理やクイックハードモードによるリハビリ対策などを備えた高機能エアマットです。

ご利用者 負担額	1割	円/月	レンタル料金 円/月
	2割	円/月	
	3割	円/月	



床ずれ防止用具

福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード
17-1005コード
67-1005

【単位:cm】

◆ビッグセル∞(インフィニティ)

CAPE

圧
切替型除湿
効果

厚さ17cm


83cm幅

1日あたりの
電気代
約6.9円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:8.3(8.6)kg

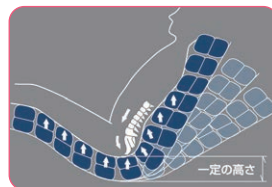背あげ自動内圧
コントロール

拘縮対応モード



通常モード



拘縮対応モード

微波動モード



通常モード



微波動モード

屈曲拘縮や病的骨突出などがある利用者に対して高い体圧分散性能を発揮します。背あげ時の自動圧力調整や換気モードによるムレ対策により、より安楽で快適に過ごせる高機能エアマットです。

■品番:CR-550 / CR-555

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

●オスカー

株式会社 モルテン

圧
切替型除湿
効果冷え
対策体位変換
機能

厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの
電気代
約5.5円

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:12.0(13.5)kg

■体位変換機能



安定支持フォーム



左側臥位



仰臥位



右側臥位



ひざ上げ



セミファウラー位

4つのポジショニングセルで、様々な身体状況に対応する自動体位変換機能や体位保持機能付エアマットです。生活動作のための安定性と安全性が高く、ムレ対策・冷え対策も可能です。

■品番:MOSC83 / MOSC91

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月


レンタル料金

円/月

■スコープライト

株式会社 モルテン

新規採用

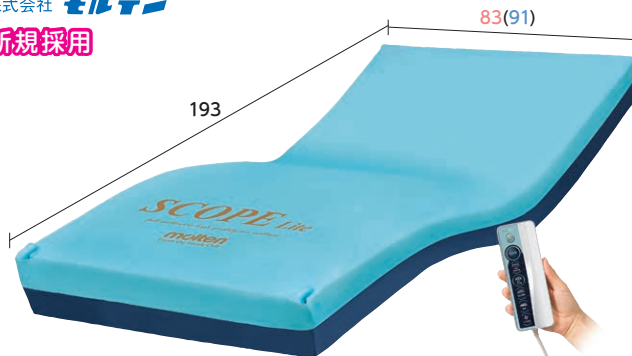圧
切替型除湿
効果体位変換
機能


厚さ17cm

83cm幅

1日あたりの
電気代
約2.3円

90・91cm幅

重 量:10(11)kg

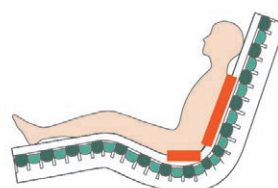

背上げ時の底着き対策・背抜き

臥床時(スタート)

静止-体圧調整

30分間体動がなかったら

除圧-圧切替

30分間体動がなかったら

除圧-体位変換

除圧のための低角度の体位変換



さまざまな身体状態への適応

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、状態の変化に合わせてマットレスが自動運転で対応。最適な圧対策を行います。低角度の体位変換機能付きです。

■品番:MSCPL83/MSCL91

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

*地域によっては取扱いのない商品もございます。 *表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
*商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 *商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。