

褥瘡対策に関する診療計画書にある危険因子

自立体位変換
(寝返り)

病的骨突出

浮腫
(局所以外の部位)


関節拘縮

皮膚湿潤
(多汗/尿・便失禁)

栄養状態低下

褥瘡の有無

NPUAP分類(2007年)

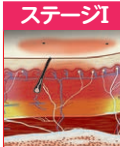

術後

OH
スコア
レベル褥瘡なし
予防

◎

◎

○

軽度

◎

◎

○

中等度

◎

◎

◎

○

中等度

◎

◎

◎

中等度

◎

◎

◎

○

中等度

◎

◎

○

中等度

○

◎

◎

◎

○

○

○

圧切替
非設定

高度

○

◎

◎

○

○

高度

○

◎

◎

○

○

静止設定

高度

○

○

◎

◎

◎

○

三段階
圧切替

高度

○

○

◎

◎

◎

○

微波動
モード

高度

○

◎

◎

○

高度

○

◎

◎

○

○

○

静止型

高度

○

◎

◎

◎

○

圧切替
非設定

高度

OHスケール


評価項目	判定		
1 自立体位変換	できる 0点	どちらでもない 1.5点	できない 3点
2 病的骨突出(仙骨)	なし 0点	中軽度・ 1.5点	高度 3点
3 浮腫(むくみ)	なし 0点	あり 3点	
4 関節拘縮	なし 0点	あり 1点	
合計	点		

OHスコアレベル


0点	危険要因なし
1～3点	軽度 レベル
4～6点	中等度 レベル
7～10点	高度 レベル

2. 病的骨突出の判定基準


- 0cm以下なら「なし」

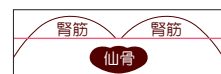

- 0～2cm未満なら「軽度・中等度」

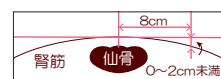

- 2cm以上なら「高度」

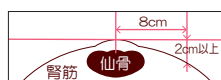

3. 浮腫(むくみ)の判定基準





床ずれ防止用具

【単位:cm】

●夢柔力マット




静止型


厚さ8.5cm

90・91cm幅

重量:7.0kg

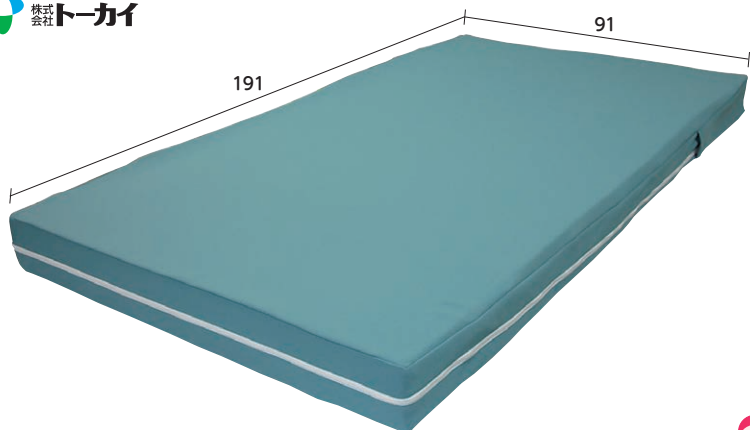

(夢柔力マット断面図)

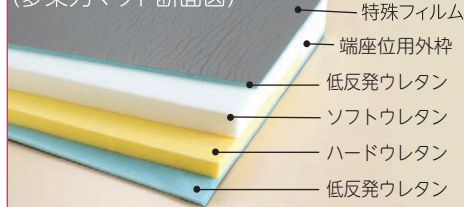

低反発ウレタンを使い体圧を理想的に分散します。また、症状による使い分けができるソフト・ハードの2層構造になっています。

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

●アルファプラL

Taica

静止型


ムレ
防止

厚さ10cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:7.6kg

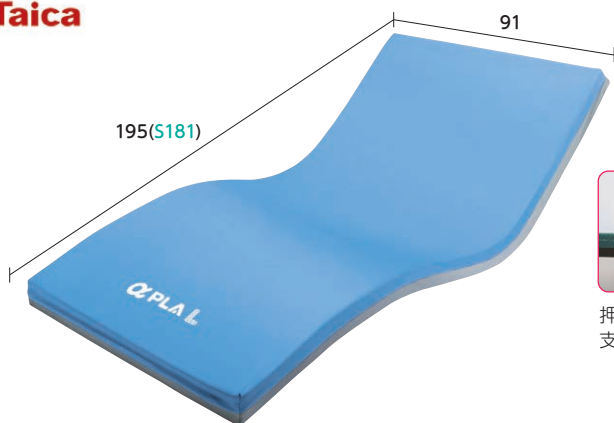

押し返すような感覚で立ち上がりを支援します。



■品番:MB-LW1R

床ずれが心配になり始めた方に適した体圧分散を行い、高弾力で動きやすいマットレスです。背あげ時にはアルファゲルがお尻を支えて安定させ、底付きを防止します。

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

●アルファプラF

Taica

静止型


ムレ
防止

厚さ13cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重量:9.5kg

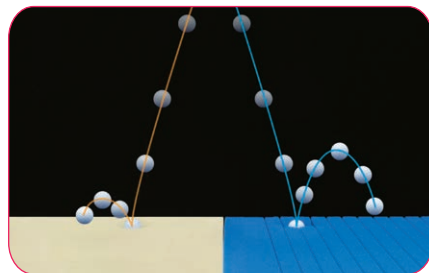

■品番:MB-FW1R

柔らかいのに弾力があるので、少ない力での寝返りや起きあがりをサポートするマットレスです。体重の軽い方から重い方まで高い体圧分散効果が得られます。

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

【単位: cm】

◆ディンプルマットレス

静止型

厚さ12cm

90・91cm幅

ショートサイズ有


重量:6.6kg

感染対策も万全な抗菌加工


CAPE

191(S180)

90

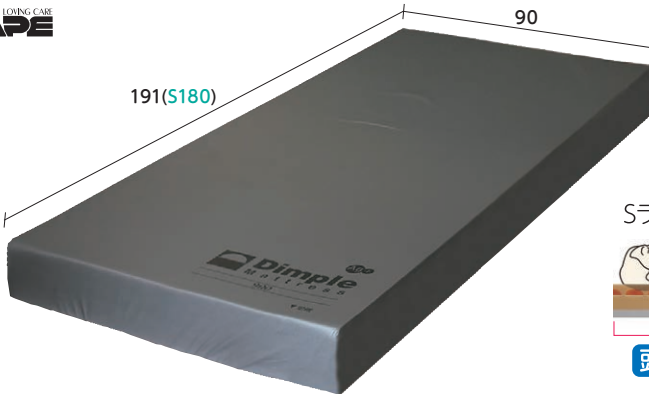

Sライン姿勢保持

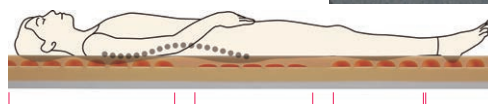

頭部・胸部

腰部

下肢部 踵部

■品番:CR-541

ディンプル形状の空間とスリット加工の複合形状が、踵や骨突出部位はピンポイントで沈み込ませ、大きな部位は接触面積を増やすことで体重バランスに合わせた圧再分配を行います。

ご利用者
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

●キューオラ

静止型

ムレ
防止

厚さ10cm

90・91cm幅





ショートサイズ有

重量:7.0kg

CAPE

191(S180)

90

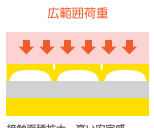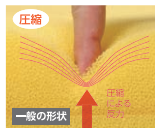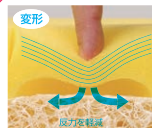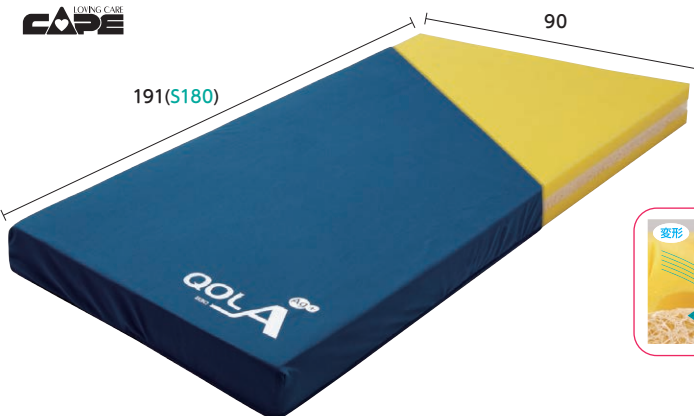

■品番:CR-591

ご利用者
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

中間層に安定感のある**ブレスエアー®**を組み合わせることで、表面の体圧分散機能を活かしながら動こうとする力をサポートします。

●ナーセントコンタ

アイ・ソネックス



静止型

ムレ
防止

厚さ11~15cm

90・91cm幅

重量:8.3kg

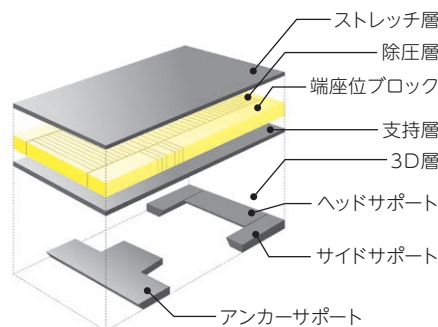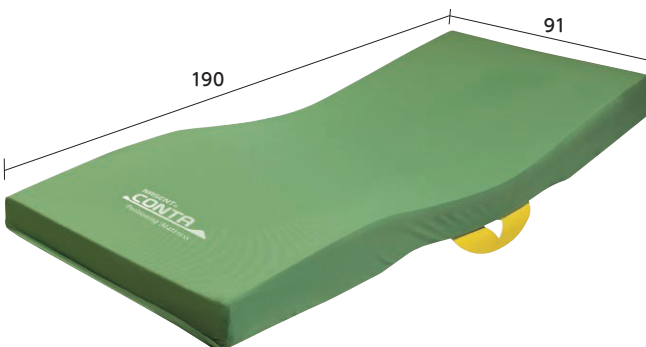ベッド背上げ時の
滑りすわりや横倒れを防止寝位置・座り位置を
明確にする「ねすわりガイド」

■品番:NCMA-91

ご利用者
負担額

1割

円/月

2割

円/月

3割

円/月

レンタル料金

円/月

4層構造の3Dフォームで体圧分散性と姿勢保持を両立。立体形状のサポート部の働きで背上げ時の滑りすわりや横倒れを防ぎます。**ねすわりガイド**により移乗や寝る位置の最適な場所をサポートします。



床ずれ防止用具

◆こちあ利楽

圧
切替型除湿
効果

厚さ13cm

90・91cm幅


1日あたりの
電気代
約2.2円

ショートサイズ有

重量:10.0kg



PARAMOUNT BED

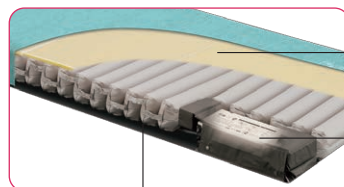i-fitting (かたさ自動運転機能)
電源を入れるとすぐに機能します体重
連動自動調圧体形
連動自動調圧背角度
連動自動調圧背あげ時にカバーを滑らせることで、
背部や踵部に生ずるズレを軽減する
グライドシートベッドまわりが邪魔にならない
ビルトインポンプ

約1cmの薄いトップクッション

■品番:KE-971S

20kgから138kgまでの**体重**や円背・拘縮などの**体形**、そして**背あげ角度**
に**適したかたさを自動**で検知し**調整**。また**背あげ時のズレ**を軽減するグ
ライドシート、エアマットの凹凸感を和らげるトップクッション付きです。ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

●ステージア

圧
切替型除湿
効果冷え
対策


厚さ13cm

90・91cm幅

1日あたりの
電気代
約5.3円

ショートサイズ有

重量:11.0kg

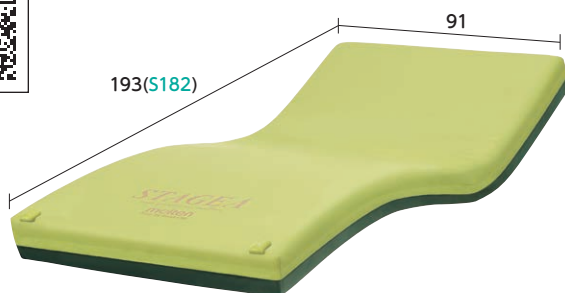株式会社 **モルテン**

193(S182)

91

ハイブリッド構造

●長さ方向の断面図



マイクロエアセル

100:50圧切替 (残圧制御)

フィッティング層

マイクロエアセルの動きに連動した
独自形状の高耐久ウレタンフォーム

底着き防止層

高耐久ウレタンフォーム

■品番:MSTA91

冷え対策と**ムレ対策**ができる圧切替型のハイブリッドエア
マットです。ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

エアマットの停電時やポンプ不良などの緊急時の対応について

【パラマウントベッド】 底づきの心配はありません

停電時は空気の排出を自動的に停止します。約2週間空気を保持することができます。
ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は動きません。
電源復旧後は、停電前の設定が維持されます。

【モルテン】 底づきの心配はありません

長時間の停電で、エアセルの空気が全て抜けてしまったとしてもウレタンフォームの
フィッティングフォーム+底着き防止層があるため、従来のウレタンフォーム系静止型
マットレス同等の体圧分散性が確保されています。
ただし空気が抜けた状態では、目標とする体圧分散性能は発揮されません。
停電復旧後には停電前に設定していた条件に戻ります。

【ケープ】 底づきの心配はありません

災害時などの停電時にエアマットレスの空気漏れを自動で防ぐ機種です。停電と同時に専
用ポンプ内の電磁弁が作動してエアセル内の空気漏れを自動で遮断。マットレス全体の内
圧を約14日間保持します。ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は動きません。
電源の復旧後は、直前の設定に自動復帰します。

※ただし、停電中は圧切替などの除圧効果や機能は動かないため、必要に応じて体位変換を行うなどの対策も必要です。

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。

●マイクロクライメイト ネクサスアイビー

圧
切替型除湿
効果

厚さ12cm

90・91cm幅

ショートサイズ有

重 量:8.1kg

1日あたりの
電気代

約5.2円

CAPE

マイクロクライメイト対応のファンモーター
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現

傾斜型2層式エアセル×デュアルフィットセル



■品番:CR-773

接触面の温度・湿度の上昇を抑える「マイクロクライメイト対応システム」搭載。傾斜型2層式エアセルが臀部に斜めにかかる力をしっかりと受け止めて、身体のずり落ちを軽減します。

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月	円/月	円/月

●マイクロクライメイト ビッグセルアイズ

圧
切替型除湿
効果

厚さ15cm

90・91cm幅


ショートサイズ有

重 量:6.8kg

1日あたりの
電気代

約5.2円

CAPE

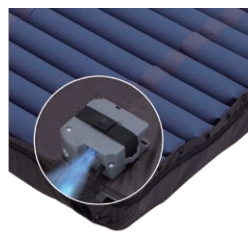マイクロクライメイト対応のファンモーター
皮膚局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現背上げ角度・時間管理
アシスト機能

■品番:CR-753

足元に搭載されたファンモーターがマットレス内にこもった熱と湿気を吸い込み、外部に排気。常に効果的な空気の流れを作り出します。背上げ時の角度・時間管理やクイックハードモードによるリハビリ対策などを備えた高機能エアマットです。

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月	円/月	円/月

◆ビッグセル∞(インフィニティ)

圧
切替型除湿
効果

厚さ17cm

90・91cm幅

ショートサイズ有


重 量:8.6kg

1日あたりの
電気代

約6.9円

CAPE

数量限定

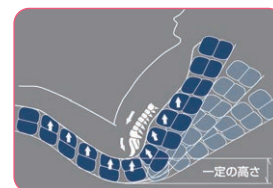背あげ自動内圧
コントロール

拘縮対応モード




通常モード



拘縮対応モード

微波動モード

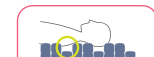

通常モード



微波動モード

■品番:CR-555

屈曲拘縮や病的骨突出などがある利用者に対して高い体圧分散性能を発揮します。背あげ時の自動圧力調整や換気モードによるムレ対策により、より安楽で快適に過ごせる高機能エアマットです。

ご利用者 負担額	1割	2割	3割	円/月	円/月	円/月	レンタル料金
				円/月	円/月	円/月	円/月



床ずれ防止用具


福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与

コード
17-1005コード
67-1005

【単位: cm】

■スコープライト

株式会社 モルテン

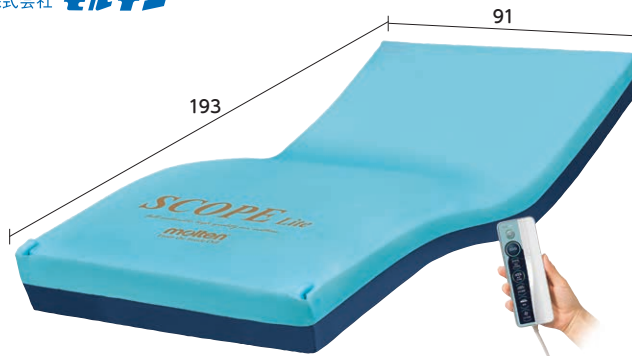
圧
切替型除湿
効果体位変換
機能

厚さ17cm

90・91cm幅

1日あたりの
電気代
約2.3円

重 量: 11kg

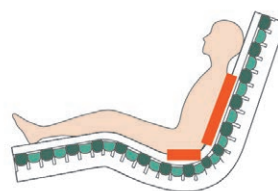

背上げ時の底づき対策・背抜き

臥床時(スタート)

静止・体圧調整


30分間体動がなかったら

除圧・圧切替

30分間体動がなかったら

除圧・体位変換

除圧のための低角度の体位変換

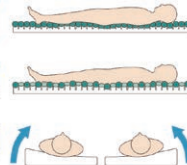

さまざまな身体状態への適応

■品番: MSCPL91

リモコンの全自動ボタンを押すだけで、状態の変化に合わせてマットレスが自動運転で対応。最適な圧対策を行います。低角度の体位変換機能付きです。

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

■オスカー

株式会社 モルテン

圧
切替型除湿
効果冷え
対策体位変換
機能

厚さ17cm

90・91cm幅

1日あたりの
電気代
約5.5円ショートサイズ有
重 量: 13.5kg

安定支持フォーム

■体位変換機能



4つのポジショニングセルで、様々な身体状況に対応する自動体位変換機能や体位保持機能付エアマットです。生活動作のための安定性と安全性が高く、ムレ対策・冷え対策も可能です。

■品番: MOSC91


ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

■こちあ利楽 flow(フロー)

PARAMOUNT BED

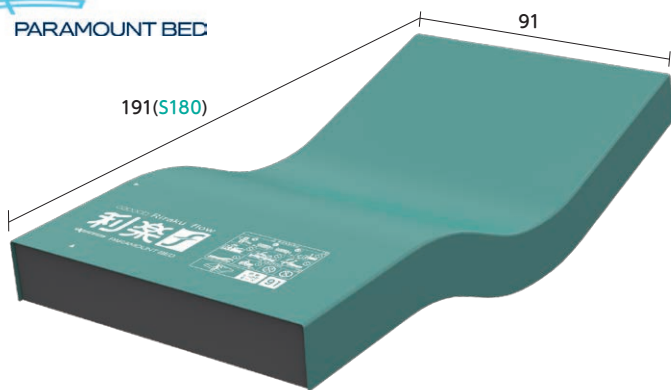圧
切替型除湿
効果体位変換
機能

厚さ17cm

90・91cm幅

1日あたりの
電気代
約2.5円ショートサイズ有
重 量: 8.5kg

スモールフロー機能(自動体位変換機能)



バックサポート機能

■品番: KE-911S

全自動運転のこちあ利楽に自動体位変換機能が付いたエアマットレス。下部にある4つのスモールフローセルが順番に膨張・収縮をゆったりと繰り返すことで、違和感を与えにくい小さな体位変換が可能です。

ご利用者
負担額1割
2割
3割円/月
円/月
円/月

レンタル料金

円/月

※地域によっては取扱いのない商品もございます。 ※表示してあるレンタル料金には消費税が含まれております。
※商品の仕様はメーカーの製造時期によって異なる場合がございます。 ※商品によっては色・デザインが異なる場合もございます。